

Credito: 4860 - V3 2019

onyx
easy cough



Su respiración es nuestra inspiración.

lumiär.uy

Av. Italia, 6160 | Carrasco - Montevideo
T. 00598 2 60 39525 | 00598 99 403938

LUMIAR
HEALTHCARE

Asistente de Tos

Lo mejor de nosotros para todos

Onyx Easy Cough es el equipo de ayuda a la tos que ofrece eficiencia y confort al paciente y facilidad para los profesionales, cuidadores y familia.

Con excelente **costo-beneficio**, pequeño, ligero y fácil de manejo puede ser utilizado en ambientes domiciliario u hospitalario, en pacientes adultos y pediátricos que estén o no bajo asistencia ventilatoria invasiva o no invasiva.



BENEFICIOS

- Ayuda o reemplaza la tos
- Ayuda a eliminar las secreciones pulmonares
- Reduce la ocurrencia de infecciones respiratorias
- Disminuye el tiempo de internación hospitalaria
- Alternativa segura y cómoda para la succión
- Disminuye la falta de aire
- Puede usarse con máscara facial, boquilla, tubo endotraqueal o traqueostomía
- Ayuda a la expansión pulmonar
- Previene atelectasia



CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno, innovador, con display grande y colorido
- Flujo de inhalación ajustable
- Configuración intuitiva y objetiva (unos pocos click)
- Modos automático y manual (touch screen y botón pedal (opcional)
- Visualización del volumen corriente (ayuda a determinar la presión inspiratoria adecuada)
- Visualización del pico de flujo de tos (ayuda a determinar la presión inspiratoria adecuada)
- Cuenta regresiva para el inicio de la terapia
- Visualización gráfica de las presiones




TERAPIA MANUAL CON SÓLO 1 CLICK!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJUSTES	PARÁMETRO RANGO DE PRECISIÓN
Presión inspiratoria	10 a 70 cmH2O ±5%
Presión espiratoria	-10 a -70 cmH2O ±5%
Tiempo de inspiración	0 a 9,9 s ±5%
Tiempo de espiración	0 a 9,9 s ±5%
Tiempo de pausa	0 a 9,9 s ±5%
Tiempo de inicialización	0 a 60 s ±5%

EL TIEMPO DE INSPIRACIÓN EN EL MODO MANUAL PUEDE LLEGAR HASTA 60SEGUNDOS

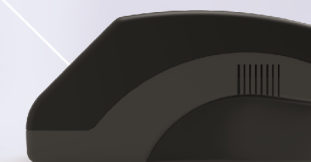

easy cough
onyx

Asistente de Tos
Lo mejor de nosotros para todos

LUMIAR
HEALTHCARE